




Массажное кресло VictoryFit VF-M58

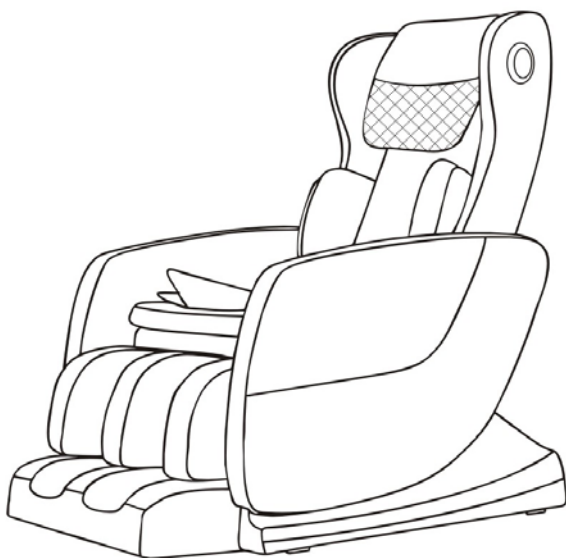

Инструкция по эксплуатации

Содержание

I. Содержание.....	2
II. Меры предосторожности.....	3
1. Условия эксплуатации.....	3
2. Предостережения.....	3
III. Подготовка к использованию.....	6
1. Установка сиденья.....	6
2. Регулировка сиденья.....	6
3. Перемещение.....	7
4. Выбор расположения.....	7
5. Включение.....	8
IV. Название и функции основных компонентов.....	9
V. Панель управления.....	9
VI. Пульт управления.....	10
VII. Ежедневный уход.....	14
VIII. Технические характеристики.....	14
Гарантийные обязательства.....	15

II. Меры предосторожности

1. Условия эксплуатации

(1) Во избежание появления плесени, поражения током, возгорания или механических повреждений не храните и не эксплуатируйте кресло в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная комната, сауна, термальные источники и т.д.

(2) Не используйте кресло в помещениях с комнатной температурой выше 40°C.

(3) Не используйте кресло вне помещения.

(4) Не используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией пыли или грязи, а также в помещениях с недостатком свежего воздуха.

(5) Не оставляйте кресло вблизи источников тепла или нагревательных приборов, а также под воздействием прямого солнечного света. Это может привести к перегреву комплектующих кресла и к возможному возгоранию.

(6) Не размещайте кресло на неровной поверхности. Выбирайте для этого только ровные поверхности.

(7) Во избежание поражения электрическим током убедитесь в том, что розетка надлежащим образом заземлена. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу заземления.

(8) Не курите во время использования кресла.

2. Предостережения

Следующим категориям людей необходимо проконсультироваться с врачом или перед использованием кресла или воздержаться от его использования. В противном случае это может привести к дискомфорту и даже к риску опасных несчастных случаев.



- (1) Лица со злокачественными опухолями или гнойными нарывами.
- (2) Лица с тяжелыми болезнями сердца.
- (3) Лица с тяжелыми кожными заболеваниями.
- (4) Лица с тяжелым остеоартритом.
- (5) Беременные женщины.
- (6) Лица, проходящим реабилитацию под руководством врача, в особенности при наличии физических отклонений.
- (7) Лица с искривлением позвоночника или горбом, вызванными травмами или заболеваниями.
- (8) Лица с деформированными суставами.
- (9) Лица с имплантированными медицинскими устройствами, такими как кардиостимулятор.
- (10) Лица с острыми симптомами заболеваний внутренних органов (гастрит, энтерит, дизентерия, гепатит и т.д.)
- (11) Лица с тяжелыми нарушениями циркуляции крови в ногах.
- (12) Определенная часть поверхности кресла может сильно нагреваться, поэтому лицам с нарушениями чувствительности и или отсутствием чувствительности к теплу нужно проявлять особую осторожность.
- (13) Лица с повышенной температурой тела.
- (14) Кресло не рекомендуется использовать лицам (включая детей), страдающим физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также не имеющими соответствующих навыков и знаний, без сопровождающего лица, ответственного за их безопасность и помогающего в эксплуатации кресла.
- (15) Внимательно следите, чтобы дети не играли с



креслом.

(16) В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить соответствующей запасной частью, полученной у производителя или в службе технического обслуживания.


ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения травм запрещено использовать кресло без накидки шейно-плечевого отдела. Не позволяйте лицам младше 18 лет и лицам, не способным контролировать свое поведение (например, психически больным, умственно отсталым, парализованным и т.д.), самостоятельно эксплуатировать массажное кресло. Это может привести к травме или поломке кресла.



III. Подготовка к использованию

1. Установка сиденья

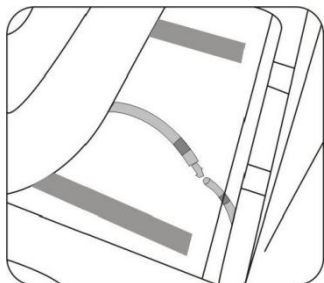


Извлеките и подключите



трубки через соединение

2. Регулировка сиденья

При помощи кнопок подъема и опускания сиденья, а также других вспомогательных кнопок отрегулируйте наиболее удобное положение тела в кресле.

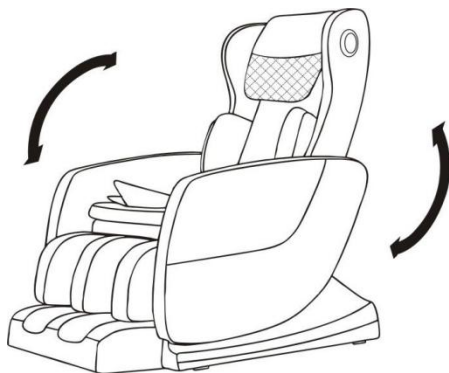

ВНИМАНИЕ : При регулировании спинки и отделения для ног следите, чтобы спереди и сзади кресла оставалось достаточно места.

3. Перемещение


При перемещении поднимайте оба подлокотника

Внимание!

Не перемещайте кресло с сидящим на нем человеком.

Не ставьте кресло на легко повреждаемое покрытие.

Для перемещения используйте специальные колесики.

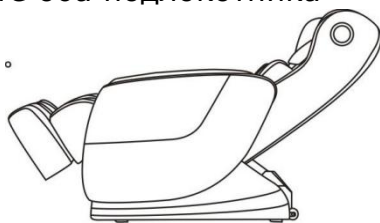

4. Выбор расположения


Перед проведением массажа убедитесь, что вокруг кресла достаточно свободного места.

(1) Убедитесь в наличии достаточного места для откидывания спинки кресла и подъема отделения для ног.

(2) Убедитесь, что перед и позади массажного кресла есть не менее 40 см свободного места.

(3) Убедитесь, что перед массажным креслом и позади него нет препятствий.


(4) Пожалуйста, положите ковер под массажное кресло, чтобы не повредить напольное покрытие.

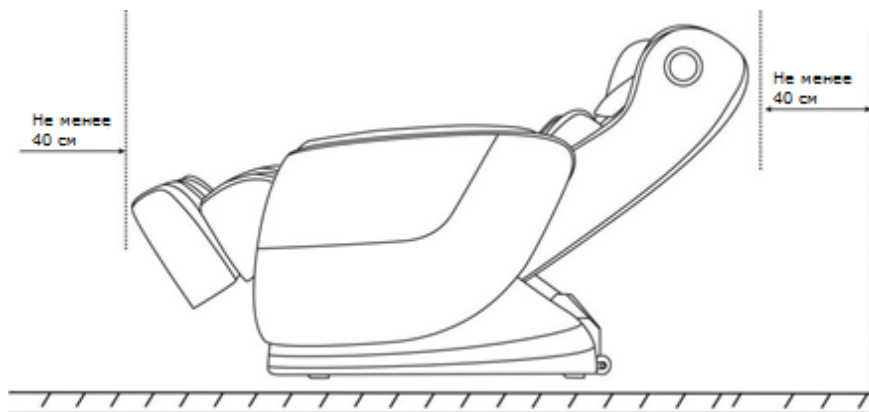

5. Включение

(1) Осмотритесь

Убедитесь, что вокруг нет препятствий.

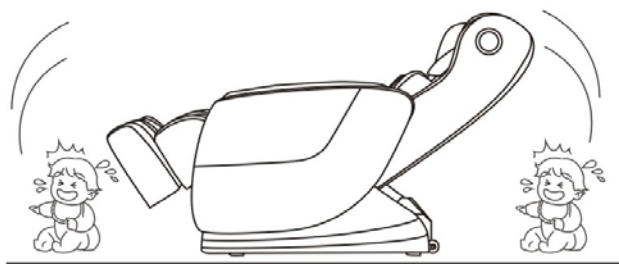


(2) Подключите вилку шнура питания в розетку и нажмите кнопку питания.


Обратите внимание

- ① Перед включением проверьте, не зажат ли шнур питания под массажным креслом.
- ② Убедитесь в наличии заземления.
- ③ Убедитесь, что все переключатели на кресле (включая кнопку питания) выключены, прежде чем вставлять вилку в розетку.

IV. Название и функции основных компонентов

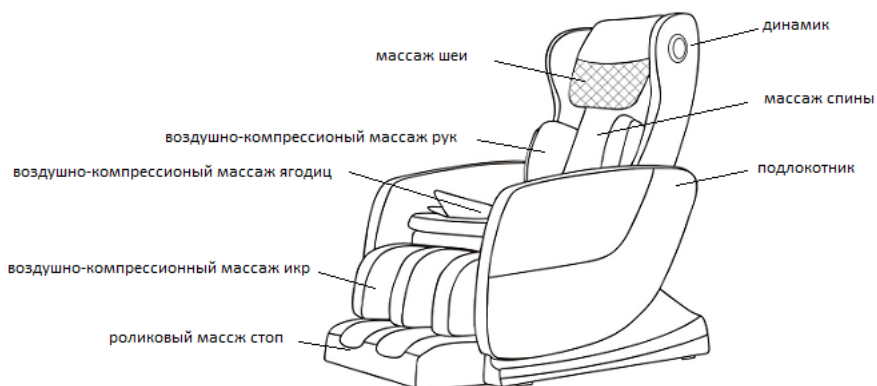

V. Панель управления

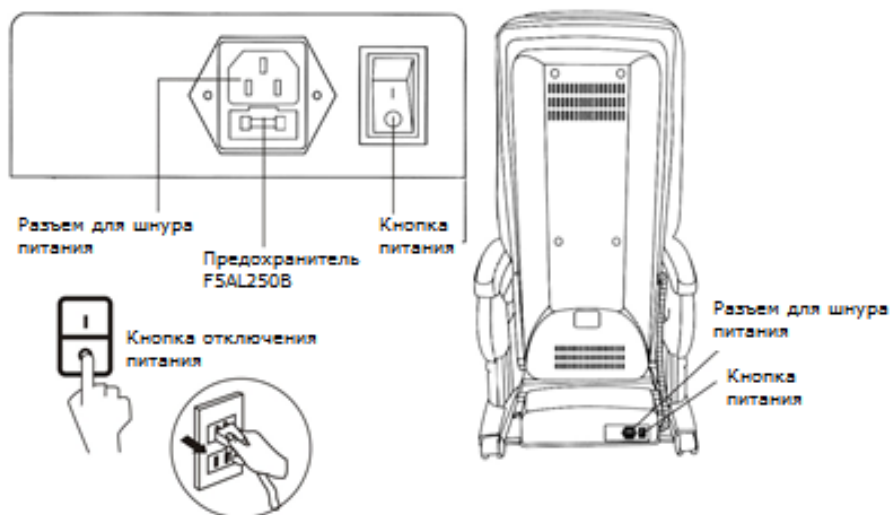

VI. Пульт управления


Кнопка включения



Mode

Автоматический режим

Массаж шеи/спины

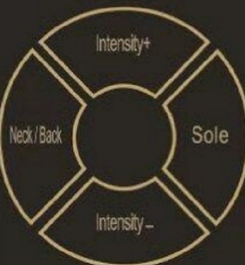

Увеличение интенсивности массажа

Массаж ног

Снижение интенсивности массажа

Воздушная подушка для шеи/рук/ног

Airbag

Timing

Установка таймера

Нагрев

Heating

Кнопка подъема спинки



Кнопка опускания спинки

Функции пульта управления

Описание кнопок пульта управления



Кнопка включения

По умолчанию включается автоматический режим.



Кнопка переключения автоматических программ

Предусмотрено 20 автоматических программ.

Ручной режим:



Кнопка массажа шея/спина

В ручном режиме кнопка переключает между массажем зоны шеи и спины.



Кнопка Массажа ног

Включение и выключение массажа ног.



Кнопка увеличения интенсивности массажа

Нажатие кнопки увеличивает интенсивность массажа. Всего предусмотрено 3 уровня: низкий средний и высокий.



Кнопка снижения интенсивности массажа

Нажатие кнопки снижает интенсивность массажа. Всего предусмотрено 3 уровня: низкий средний и высокий.



Кнопка переключения воздушной подушки

В автоматическом режиме происходит переключение между массажем шеи, рук и ног.



Кнопка нагрева


Включает и выключает нагрев зоны поясницы и ног




Кнопка таймера

Включение таймера и установка длительности массажа: 15-20-25-30 минут.

Кнопка подъема спинки

Нажмите и удерживайте кнопку "  " для подъема спинки. (Во время подъема спинки все функции массажа приостанавливаются. После фиксации нужного положения при отпускании кнопки ранее выбранный режим массажа автоматически восстанавливается).

Кнопка опускания спинки

Нажмите и удерживайте кнопку "  " для опускания спинки. (Во время опускания спинки все функции массажа приостанавливаются. После фиксации нужного положения при отпускании кнопки ранее выбранный режим массажа автоматически восстанавливается).

Переключение режима

Автоматический режим: в автоматическом режиме доступно 20 программ массажа

Ручной режим: для перехода в ручной режим, находясь в автоматическом режиме, нажмите необходимые кнопки управления и выберите желаемые массажные функции.

Подключение по Bluetooth

- ① По умолчанию функции Bluetooth и голосовых подсказок на кресле включены.
- ② Включите на мобильном телефоне Bluetooth и выполните поиск устройства LEK-988AMY. Введите пароль для подключения – 8888. Подключение успешно выполнено. Поскольку подключение по Bluetooth требует подтверждения на ответном устройстве, нажмите кнопку подтверждения, расположенную за пультом управления.



VII. Ежедневный уход

(1) Поддерживайте чистоту массажного кресла. Защищайте его от пыли и повышенной влажности.

(2) Если вы не используете кресло в течение длительного времени, пожалуйста, накройте его тканью.

(3) Не устанавливайте массажное кресло под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой, поскольку таким образом обивка кресла быстрее поблекнет и износится.

(4) Во время очистки кресла выключите кнопку питания и извлеките вилку из розетки.

(5) Не используйте средства, содержащие растворители (такие как бензол), для очистки массажного кресла, поскольку это может привести к обесцвечиванию, износу и растрескиванию материала обивки.

(6) В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить соответствующей запасной частью, полученной у производителя или в службе технического обслуживания.

VIII. Технические характеристики

Название	массажное кресло	
Модель	VF-M58	
Номинальное напряжение	220 В	
Номинальная частота	50 Гц	
Номинальная мощность	80 Вт	
Номинальный сеанс работы	15min	
Класс безопасности	1 класс	
Стандарты	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008



Гарантия

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за использование нашей продукции. Наша компания обеспечит вам следующие услуги на основе настоящей гарантии и чека в соответствии с соответствующими положениями Закона о защите прав потребителей:

1. Гарантийный срок на продукцию составляет один год (считается с даты выставления счета). В течение гарантийного срока при отсутствии с вашей стороны нарушений эксплуатации мы обеспечиваем бесплатный ремонт любых неисправностей, возникших из-за качества самого изделия.
2. Массажное кресло предназначено исключительно для домашнего использования
3. На протяжении гарантийного срока при любом обращении в авторизованный производителем сервисный центр по поводу неисправности, вызванной качеством самого изделия, необходимо предъявить заполненный гарантийный талон и чек.
4. Любые изменения или фальсификация гарантийного талона или чека незамедлительно аннулируют гарантию.
5. Пожалуйста, храните гарантийный талон и чек в надежном месте во избежание их утери.

В следующих случаях гарантийное обслуживание не предоставляется:

- А. Утеря гарантийного талона.
- Б. Неисправность, вызванная ненадлежащей эксплуатацией изделия, в том числе использование кресла в организациях или любых иных коммерческих целях.
- В. Вмешательство в изделие неавторизованного персонала.
- Г. Неисправности или повреждения, вызванные передвижением или падением изделия.
- Д. Повреждения, вызванные ненадлежащими хранением, уходом или условиями эксплуатации.
- Е. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями.



Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

ДЕКЛАРАЦИЯ ТС № RU Д-СН.ПХ01.В.07379/20

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ОТ 06.03.2020 ПО 05.03.2025

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.

Наименование товара: Кресло для различных видов массажа

Артикул: VF-M58

Производитель: Fuan Leercon Electronic Co., Ltd.

Адрес производителя: Китай, № 17 Dacheng Road, Qinxiyang Industry Zone, Fuan City, Fujian City, Fujian Province

Страна производства: Китай

Импортер: ООО «Сан Планет СПб»

Адрес Импортера: 191167, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Реки Монастырки, дом 5, литер В, пом/ком 3-Н/4.

Дата изготовления: 06/2021

Гарантийный срок: 12мес

Срок службы: 18мес

